



舌圧の測定方法

バルーン内圧を所定圧に調整したプローブを口にくわせる

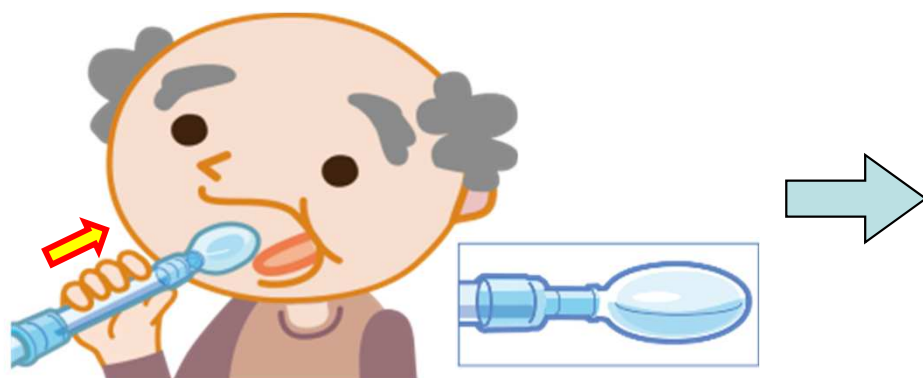


口に入れる ※プローブの向きに注意

プローブを前舌で押し上げる

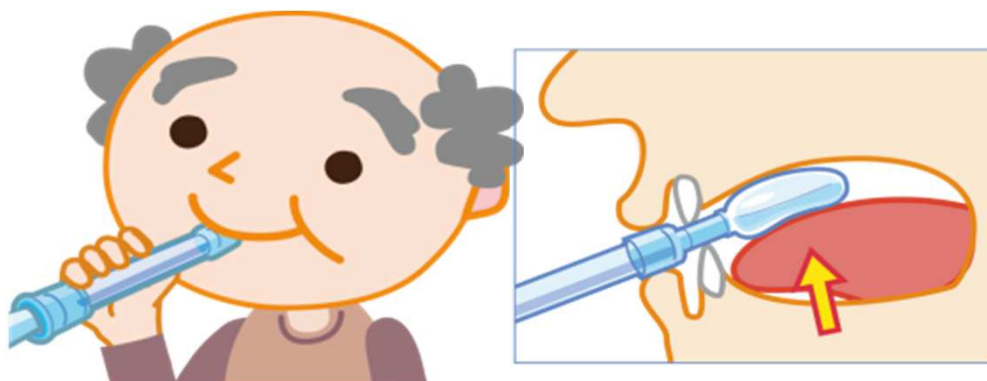

硬質リング

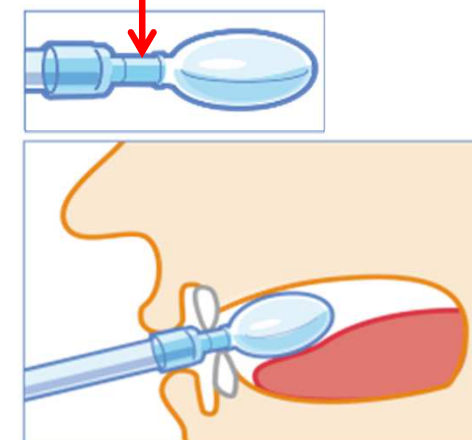

硬質リングを前歯で軽く把持する



強く噛み過ぎないこと


- 約7秒間、舌でバルーンを押し潰し、最大圧に表示された数値を記録する
- 複数回測定する場合は、一旦バルーンを口腔内から出し、バルーン内圧を再調整してから測定を再開する

舌圧の測定方法

バルーン内圧を所定圧に調整したプローブを口にくわせる



口に入れる ※プローブの向きに注意

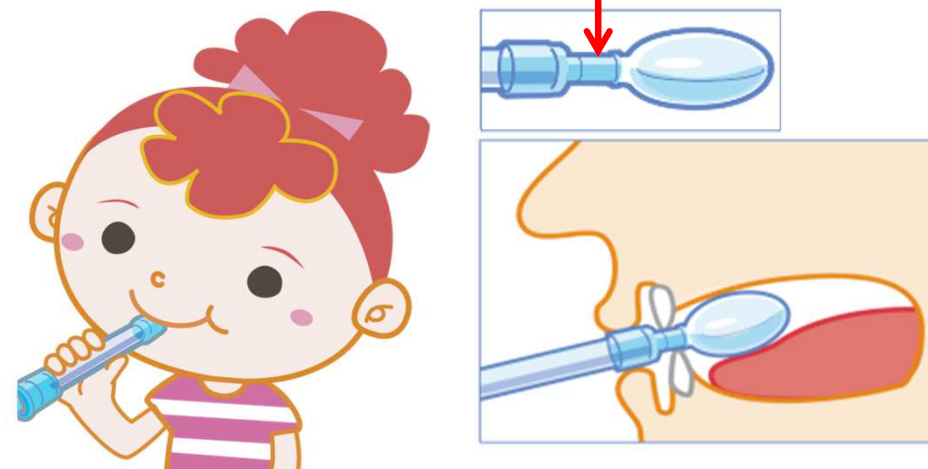


硬質リングを前歯で軽く把持する



強く噛み過ぎないこと

プローブを前舌で押し上げる

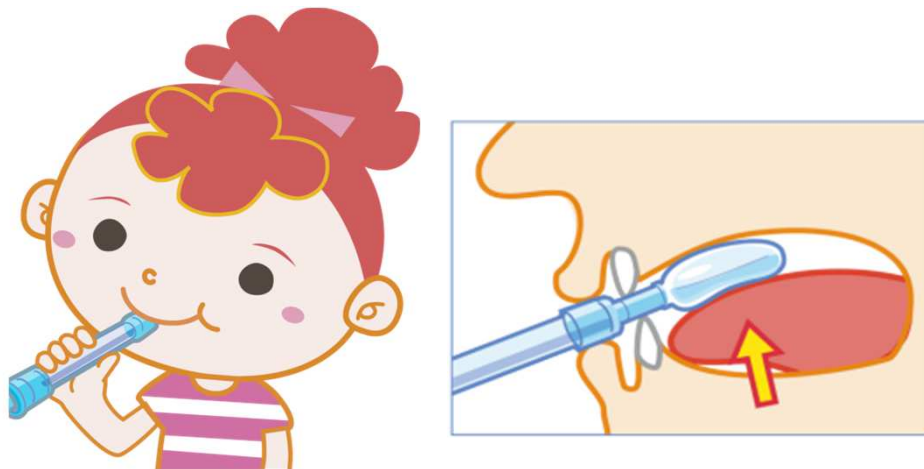

- 約7秒間、舌でバルーンを押し潰し、最大圧に表示された数値を記録する
- 複数回測定する場合は、一旦バルーンを口腔内から出し、バルーン内圧を再調整してから測定を再開する